

**ADAPTE****COMUNICAÇÃO AUMENTATIVA E ALTERNATIVA**

Guia Essencial do ADAPTE Board

Como se comunicar, personalizar pranchas e compartilhar com a rede de apoio — em poucos minutos, sem conhecimento prévio de CAA ou de tecnologia.

Versão 1.1 · Interface verificada em 30 de julho de 2026
board.adapte.com.br

Sobre este guia

Este é o **Guia Essencial** do ADAPTE Board, a prancha de comunicação gratuita da ADAPTE. Ele ensina as tarefas que quase toda pessoa usa no dia a dia — montar uma frase, falar, encontrar palavras, ajustar a voz, criar e compartilhar pranchas. Não é um inventário completo do produto: é o caminho mais curto para se comunicar bem.

Data de verificação: todas as instruções e imagens deste guia foram testadas na interface real em **30/07/2026**, em computador e em tela estreita (celular). Telas podem mudar em versões futuras — quando algo estiver diferente, procure pelo nome do botão, que costuma se manter.

O guia serve para a pessoa que se comunica com a prancha e para a rede de apoio — familiares, professores, acompanhantes e profissionais. Quando um passo é típico do adulto que apoia (por exemplo, criar uma prancha ou ativar o Modo foco), o texto indica isso. O ADAPTE Board apoia a comunicação, mas não substitui avaliação clínica, acompanhamento profissional nem atendimento de emergência.

Sumário

Sobre este guia.....	2
■ O que é CAA — e o que é o ADAPTE Board	3
■ Comece em 5 minutos	4
■ Mapa da tela: computador e celular	5
■ Montar uma frase e falar	6
■ Corrigir: apagar, limpar e salvar frase	7
■ Encontrar uma palavra: Digitar e buscar	8
■ Sugestões: PALAVRAS, Palavras novas e ROTAS	9
■ Frase natural.....	10
■ A barra de comunicação: Sim, Não, Urgência e mais.....	11
■ O diretório Palavras: 36 grupos.....	12
■ Trocar de prancha e tamanhos P, M e G	14
■ Ajustes: voz, aparência e mais	15
■ Modo foco	16
■ Compartilhar e imprimir	17
■ Estúdio: criar a sua prancha	18
■ Estúdio (continuação): organizar e editar cartões	20
■ Um cartão que abre outra prancha (+ arquivos .obz)	21
■ Conta, privacidade e aparelhos	22
■ Instalar como aplicativo, offline e atualizações	23
■ Solução de problemas	24
■ Créditos, licenças e contato	25

Como se comunicar, personalizar pranchas e compartilhar com a rede de apoio — em poucos minutos, sem conhecimento prévio de CAA ou de tecnologia.

Versão 1.1 · Interface verificada em 30 de julho de 2026board.adapte.com.br

01 O que é CAA — e o que é o ADAPTE Board

Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) é o conjunto de recursos que amplia as formas de uma pessoa se expressar — com imagens, gestos, texto e voz — além ou no lugar da fala. A CAA não atrasa a fala: ela dá à pessoa um meio de dizer o que quer, sente e pensa agora. Ecolalias, scripts e frases prontas (Gestalts) também são formas legítimas de comunicação, e o ADAPTE Board as trata como tal.

O **ADAPTE Board** é uma prancha de comunicação gratuita, em português do Brasil, que funciona no navegador — em computador, tablet ou celular, sem instalar nada e sem criar conta. A pessoa toca em cartões com pictogramas, monta uma frase e o aparelho fala em voz alta. Quem quiser pode entrar com uma conta (opcional, para adultos) para criar e sincronizar pranchas próprias.

Onde está a previsibilidade

A previsibilidade do ADAPTE Board está no **sistema**: as cores por tipo de palavra (Chave de Fitzgerald), as sugestões, a navegação e a flexão funcionam sempre do mesmo jeito. A posição exata de um cartão pode variar quando a tela muda de tamanho ou orientação — isso não é um erro: a grade se adapta ao aparelho, mantendo as mesmas regras de cor e organização.

As cores dos cartões

Cada tipo de palavra tem uma cor de borda — e a cor é um apoio, nunca a única pista: o rótulo escrito está sempre no cartão.

Pronomes eu, você, nós...	Verbos querer, ir, comer...	Adjetivos bom, igual, diferente...
Perguntas o que, quem, onde...	Negação não, parar...	Localização aqui, dentro, em cima...
Substantivos água, banheiro, casa...	Sociais oi, tchau, por favor...	Outros e ♦ Gestalt frases prontas



Papel da rede de apoio. A pessoa que usa CAA tem protagonismo sobre a própria comunicação. O melhor apoio é a **modelagem**: o adulto também usa a prancha para falar, sem exigir respostas e sem corrigir. Nenhuma resposta é "errada" — toda tentativa de comunicação vale.

02 Comece em 5 minutos

Você não precisa de conta, cadastro nem configuração. Siga estes seis passos:

1 Abra o site

No navegador (Chrome, Safari, Edge...), acesse **board.adapte.com.br**. A prancha **Essenciais** abre pronta para usar. Se aparecer um aviso de cookies ou de contribuição anônima, você pode recusar — a prancha funciona igual.

2 Toque nos cartões

Toque em **eu** → **querer** → **beber**. Cada cartão entra na barra de mensagem, no alto da tela.

3 Toque em ► Falar

O aparelho fala a frase em voz alta — e mostra a transformação: *eu querer beber* → *Eu quero beber* (é a **Frase natural**, sempre visível, nunca escondida).

4 Errou? Sem problema

O ícone  apaga a última palavra; a **borrachinha** limpa a frase inteira.

5 Não achou a palavra?

Toque em **Digitar**, escreva a palavra (ou use o microfone) e toque no resultado para inserir na frase.


6 Respostas imediatas

Na barra inferior, **Sim** e **Não** falam na hora, sem apagar a frase que estava sendo montada. **Urgência** abre "Socorro", "Preciso de ajuda", "Pare, por favor" e "Dor".




Pronto — isso já é comunicação. O resto deste guia aprofunda cada recurso: sugestões inteligentes, pranchas por contexto (Escola, Hospital), criação de pranchas próprias no Estúdio e compartilhamento com a rede de apoio.

03 Mapa da tela: computador e celular

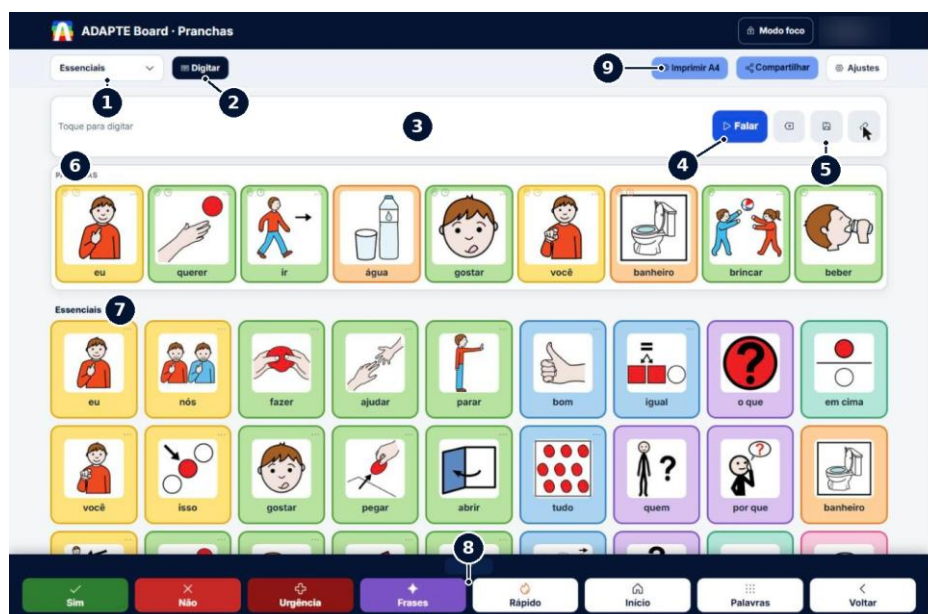

A tela principal no computador. ① Seletor de pranchas (Essenciais, Escola, Hospital e as suas). ② Digitar — busca por texto ou ditado. ③ Barra de mensagem — a frase aparece aqui. ④ > Falar. ⑤ Corrigir: apagar última palavra ✕, salvar frase 📄 e limpar tudo. ⑥ PALAVRAS — sugestões que mudam conforme a frase. ⑦ Grade de cartões da prancha. ⑧ Dock — barra de comunicação (recolhe e reabre pela setinha/botão PAINEL). ⑨ Imprimir A4 · Compartilhar · Ajustes.

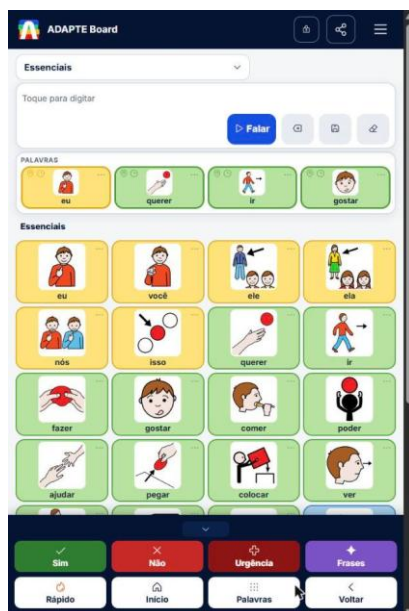

No celular, tudo continua no mesmo lugar lógico: a grade fica com menos colunas, o dock se organiza em duas linhas e os botões Imprimir, Compartilhar e Ajustes moram no menu ☰ (canto superior direito).

Rodapé

No fim da página ficam a legenda de cores dos cartões e os links **Créditos e Licenças**, **Privacidade**, **Cookies**, **Feedback** e **Contato**.

Computador × celular

Este guia mostra capturas do computador; quando o caminho muda no celular, o texto indica. A regra geral: o que no computador fica no topo da tela, no celular está no menu ☰.



A grade se adapta. No tamanho M, os mesmos 36 cartões podem aparecer em 9, 10 ou 12 colunas conforme a largura da tela. As cores e a organização por tipo de palavra não mudam.

04 Montar uma frase e falar

PARA QUE SERVE

É o coração do ADAPTE Board: transformar toques em fala.

ONDE FICA

Grade de cartões + barra de mensagem no alto + botão ► Falar.

COMO FAZER


1. Toque nos cartões na ordem do pensamento — por exemplo, **eu** → **querer** → **beber**.
2. Cada cartão entra na barra de mensagem como uma miniatura com o rótulo.
3. Toque em ► Falar.

O QUE DEVE ACONTECER

O aparelho fala a frase em voz alta e mostra, por alguns segundos, a transformação da Frase natural (ex.: *eu querer beber* → *Eu quero beber*).

SE NÃO FUNCIONAR

Confira o volume do aparelho e se ele não está no modo silencioso. Tente trocar a voz em **Ajustes** → **Voz**. Se continuar sem som, veja a [Solução de problemas](#).

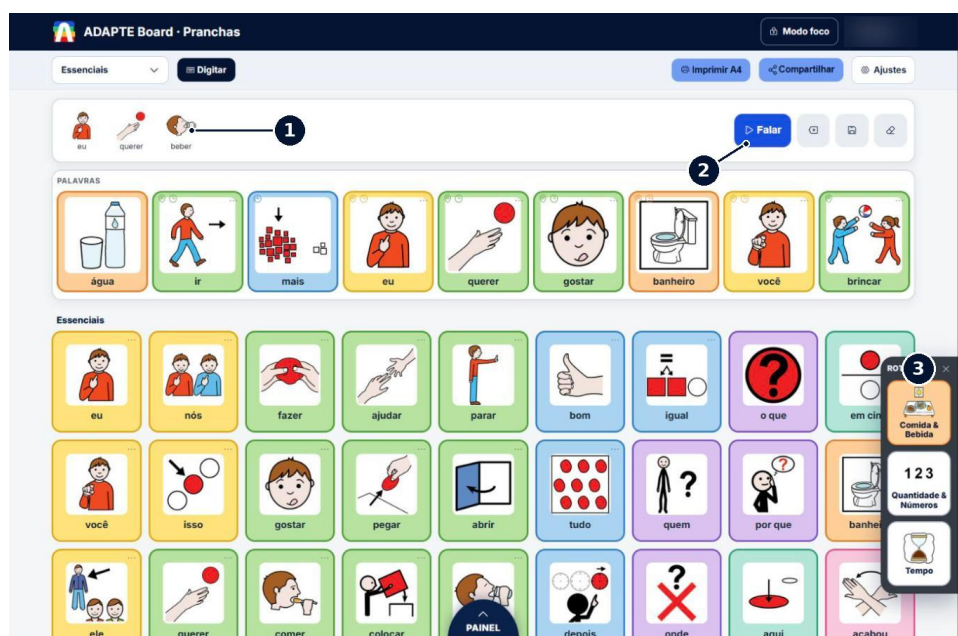

Frase em construção. ① Os cartões tocados viram a mensagem. ② ► Falar. ③ O painel **ROTAS** sugere os próximos caminhos — depois de "beber", ele oferece *Comida & Bebida*. Repare que as sugestões PALAVRAS também mudaram: *água* apareceu sozinha.



Ao falar, a Frase natural aparece de forma transparente: ① o "antes → depois" fica visível para todos. Nada é corrigido em silêncio.

Exemplo de uso. Na hora do lanche, a professora modela tocando *eu* → *querer* → *comer* e fala. Depois entrega a vez — sem exigir que a criança repita. Tocar **um único cartão** e falar também é comunicação completa.

05 Corrigir: apagar, limpar e salvar frase

PARA QUE SERVE

Desfazer um toque, recomeçar a frase ou guardar uma frase usada com frequência como um cartão.

ONDE FICA

Os três ícones à direita do botão ► Falar, na barra de mensagem.

COMO FAZER

1. ✕ (apagar) — remove só a última palavra da frase.
2. Borrachinha (limpar) — apaga a frase inteira de uma vez.
3. 💾 (salvar frase) — abre a janela *Salvar frase* em três passos: a frase, a figura (buscar nos bancos, usar o acervo, tirar foto ou enviar imagem) e revisar e salvar.

O QUE DEVE ACONTECER

Ao apagar, as sugestões PALAVRAS se reorganizam na hora. A frase salva vira um cartão reutilizável na área Frases.

SE NÃO FUNCIONAR

Se a frase salva não aparecer em Frases, confira se você concluiu o passo 3 (Revisar e salvar) — escolher só a figura não basta.



Da esquerda para a direita: ① ✕ apaga a última palavra · ② 💾 salva a frase como cartão · ③ a borrachinha limpa tudo.

Por que assim? Apagar palavra por palavra preserva o trabalho já feito — importante quando montar a frase custou esforço. Limpar tudo é um gesto separado, mais distante, justamente para não ser tocado por engano.

Exemplo de uso. "Sonequita", "Raposo" e "Eu quero ir brincar" são frases salvas que viram cartões de toque único — um recurso valioso para Gestalts e scripts que a pessoa usa com frequência.

06 Encontrar uma palavra: Digitar e buscar

PARA QUE SERVE

Falar uma palavra que não está visível na prancha — sem navegar por grupos.

ONDE FICA

Botão **Digitar**, ao lado do seletor de pranchas (no celular: menu ☰ → Digitar).

COMO FAZER


1. Toque em **Digitar**.
2. Escreva a palavra (ex.: *bola*) — ou toque no **microfone** e dite.
3. Aguarde as figuras aparecerem e toque na desejada para inseri-la na frase.
4. Sem figura boa? Toque em **Aa inserir "palavra"** para inserir só o texto — ele será falado do mesmo jeito.

O QUE DEVE ACONTECER

Aparece "N figura(s) — toque para inserir na fala", com o grupo de origem de cada figura (ex.: *Brincar, Jogos & Interesses*).

SE NÃO FUNCIONAR

A busca consulta vários bancos de imagens e pode levar alguns segundos — a mensagem "nada encontrado" às vezes aparece *antes* de a busca terminar. Aguarde um instante ou toque de novo. Tente também uma palavra mais simples (ex.: "bola" em vez de "bola de gude").

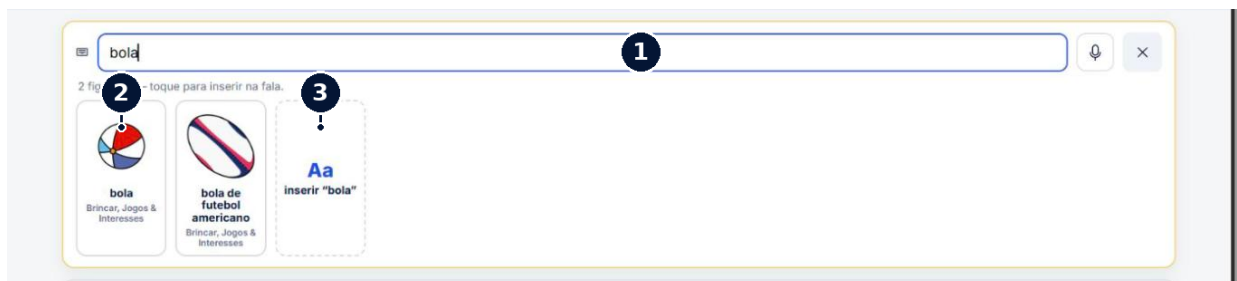

- ① Campo de busca com microfone para ditado. ② Resultados com figura — o rótulo indica o grupo de origem. ③ **Aa inserir "bola"**: insere a palavra sem figura.

Privacidade. O que você digita é processado para buscar figuras — as frases montadas não são enviadas nem guardadas nos servidores do ADAPTE Board (veja o [capítulo 17](#)).

07 Sugestões: PALAVRAS, Palavras novas e ROTAS

PARA QUE SERVE

Encurtar o caminho até a próxima palavra e, aos poucos, ampliar o repertório — sem nunca decidir pela pessoa.

ONDE FICA

A faixa **PALAVRAS**, entre a barra de mensagem e a grade; o painel **ROTAS**, que surge à direita depois de alguns toques.

COMO FAZER

1. Comece a frase normalmente. A faixa PALAVRAS se reorganiza a cada toque: depois de *beber*, *água* sobe para a primeira posição.
2. Tocar numa sugestão insere a palavra na frase — igual a um cartão comum.
3. Quando o painel **ROTAS** aparecer, toque num grupo sugerido (ex.: *Comida & Bebida*) para abrir aquele grupo; ou ignore e continue na prancha. O X fecha o painel.

O QUE DEVE ACONTECER

As sugestões mudam conforme o contexto da frase e o uso de quem se comunica — o aparelho aprende as combinações mais usadas (esse aprendizado pode ser apagado em Ajustes → Esquecer aprendizado).

SE NÃO FUNCIONAR

Sugestões estranhas no começo são normais: o modelo ainda não conhece o vocabulário da pessoa. Elas melhoram com o uso.

Palavras novas

Com a opção **Palavras novas** ligada (Ajustes → Tamanho), as sugestões podem incluir palavras que *ainda não estão* na prancha — uma porta para vocabulário novo. Se preferir que a pessoa veja somente o vocabulário já conhecido, desligue a caixa **Palavras novas** em Ajustes: a predição continua funcionando, limitada aos cartões existentes.



A sugestão não decide pela pessoa. PALAVRAS e ROTAS oferecem atalhos — aceitar, ignorar ou seguir outro caminho é sempre escolha de quem se comunica. Nenhuma sugestão entra na frase sozinha.

Navegação: Desligada, Assistida ou Automática

Em **Ajustes → Navegação** você escolhe como as rotas se comportam: **Desligada** (sem painel ROTAS), **Assistida** (o painel sugere e a pessoa decide — padrão) ou **Automática** (o app abre o grupo provável sozinho). Para quem está começando, Assistida costuma ser o equilíbrio entre apoio e autonomia.

08 Frase natural

PARA QUE SERVE

Falar a frase com a flexão natural do português — *eu querer beber* soa como *Eu quero beber* — mantendo os cartões no infinitivo, que é como o vocabulário de CAA se organiza.

ONDE FICA

Funciona automaticamente ao tocar em ► Falar. O controle fica em **Ajustes → Voz → caixa "Frase natural"**.

COMO FAZER

1. Monte a frase com os cartões e toque em ► Falar.
2. Observe o aviso que aparece na tela: **Frase natural: eu querer beber → Eu quero beber**
3. Para desligar, abra **Ajustes** e desmarque **Frase natural** — a fala passa a ser exatamente a sequência dos cartões.

O QUE DEVE ACONTECER

A transformação é sempre **mostrada na tela**, no formato "antes → depois". A Frase natural flexiona o que já foi dito — ela não inventa, não acrescenta e não remove palavras.

SE NÃO FUNCIONAR

Se o aviso não aparecer, confira se a caixa Frase natural está marcada em Ajustes. Frases de um só cartão podem não precisar de transformação — aí o aviso não aparece mesmo.




Por que assim? Mostrar o "antes → depois" respeita a autoria da pessoa: todos veem o que ela tocou e como o app flexionou. A Frase natural é uma ponte para a fala fluida — não uma correção da pessoa. Se a pessoa ou a família preferirem a fala literal dos cartões, desligar é uma escolha igualmente válida.

Quando desligar pode ajudar: em treino de consciência sintática conduzido por profissional; quando a pessoa estranha ouvir algo diferente do que tocou; ou quando os cartões já formam frases completas (Gestalts).

09 A barra de comunicação: Sim, Não, Urgência e mais

A barra inferior (dock) reúne oito botões de acesso imediato. A setinha acima dela (ou o botão **PAINEL**) recolhe e reabre a barra — útil para ganhar espaço na grade.

Botão	O que faz	Muda de tela?
Sim / Não	Falam na hora, com toque único.	Não — e a frase em construção é preservada.
Urgência	Abre Socorro · Preciso de ajuda · Pare, por favor · Dor.	Abre uma janela sobre a tela.
Frases	Frases salvas e Gestalts (cartões ↗, com variações "+2").	Sim — troca a área de cartões.
Rápido	Respostas rápidas de reparo da conversa.	Sim (veja a nota abaixo).
Início	Volta à prancha inicial.	Sim.
Palavras	Abre o diretório com os 36 grupos de vocabulário.	Sim.
Voltar	Retorna à tela anterior (ex.: do grupo para o diretório).	Sim.

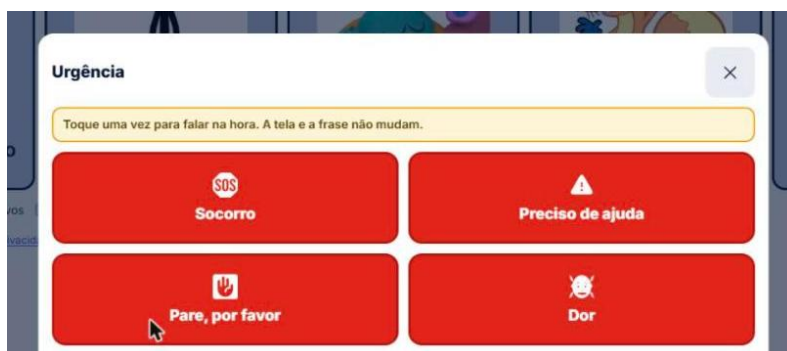

Urgência. O próprio app avisa: "Toque uma vez para falar na hora. A tela e a frase não mudam." O botão **Dor** leva à escala *Quanto dói?*, com seis faces (nível 0 a 5); há também o cartão *Como me sinto*, organizado por cores de sentimento (triste, feliz, agitado, bravo).



Importante. Esses recursos apoiam a comunicação de urgência, mas não substituem atendimento de emergência. E a pessoa deve **sempre** manter acesso fácil a "não", "pare" e "ajuda" — em qualquer prancha personalizada que a rede de apoio criar.

Nota da verificação (30/07/2026): na sessão testada, o botão Rápido exibiu o mesmo conteúdo da área Frases. Se acontecer aí também, use Frases para as respostas rápidas — o comportamento está em revisão.

10 O diretório Palavras: 36 grupos

PARA QUE SERVE

Encontrar vocabulário por assunto quando a palavra não está na prancha nem nas sugestões.

ONDE FICA

Botão **Palavras**, na barra de comunicação inferior.

COMO FAZER

1. Toque em **Palavras**. Aparecem os 36 grupos, cada um com uma figura e uma seta →.
2. Toque num grupo (ex.: *Comida & Bebida*). As palavras aparecem como cartões normais — tocar insere na frase.
3. Cartões tracejados com contagem (ex.: *frutas · 20 palavras*) são **subgrupos**: toque para entrar.
4. Use a trilha no alto (*Palavras › Comida & Bebida*) ou o botão **Voltar** do dock para retornar.

O QUE DEVE ACONTECER

Ao escolher uma palavra, além de ela entrar na frase, as ROTAS podem sugerir o próximo grupo provável.

SE NÃO FUNCIONAR

Se as imagens dos grupos não carregarem, verifique a internet — os pictogramas vêm dos servidores do ARASAAC.



Os 36 grupos verificados em 30/07/2026: Pronomes · Onde & Posições · Saudações & Cortesia · Desculpas & Esclarecer · Corpo & Saúde · Transporte · Escola & Aprendizagem · Passeios & Eventos · Casa & Rotina · Ações · Tempo · Respostas · Contar & Narrar · Roupas & Acessórios · Lugares · Tecnologia & Mídia · Higiene & Autocuidado · Escola (contexto) · Descrver & Cores · Quantidade & Números · Frases rápidas & Gestalts · Pessoas & Família · Animais · Natureza & Clima · Formas & Padrões · Autonomia & Direitos · Alimentação & Restaurante · Perguntas · Conectivos · Emoções & Regulação · Comida & Bebida · Casa & Objetos · Brincar, Jogos & Interesses · Geografia & Sociedade · Meu corpo & Proteção · Saúde & Hospital (contexto).

Palavras **1** **1a & Bebida**

café	hambúguer	bife	sanduíche	almoço	pão	água	feijão	lanches 12 palavras	sabores 5 palavras
sobremesa	carne	abacaxi	comida	suco	bolo	biscoito	ovo	doces 11 palavras	refeições 44 palavras
alface	pipoca	massa	arroz	bebidas	doce	leite	milho	frutas 20 palavras	verduras 14 palavras

■ Pronomes
 ■ Verbos
 ■ Adjetivos
 ■ Perguntas
 ■ Negação
 ■ Localização
 ■ Substantivos
 ■ Sociais
 Outros
 ■ + Gestalt

ADAPTE Board · [Créditos e Licenças](#) · [Privacidade](#) · [Cookies](#) · [Feedback](#) · [Contato](#)

Dentro de um grupo: ① a trilha mostra onde você está; ② os cartões tracejados com seta são subgrupos, com a contagem de palavras.

11 Trocar de prancha e tamanhos P, M e G

PARA QUE SERVE

Adequar o vocabulário ao contexto (Escola, Hospital...) e a quantidade de cartões à necessidade motora e visual da pessoa.

ONDE FICA

Seletor de pranchas no canto superior esquerdo; tamanhos em **Ajustes** → **Tamanho**.

COMO FAZER

1. Toque no seletor (ex.: "Essenciais"). Escolha entre as pranchas padrão — **Essenciais, Escola, Hospital** — ou uma das suas em *Minhas pranchas* (a estrela marca a prancha Início).
2. Para o tamanho, abra **Ajustes** e toque em **P, M** ou **G**. A mudança é imediata.

O QUE DEVE ACONTECER

P = 24 cartões (maiores, alvos de toque generosos) · **M = 36** (padrão) · **G = 48** (mais vocabulário à vista). Verificado em 30/07/2026.

SE NÃO FUNCIONAR

Se os cartões parecerem "fora do lugar" após girar a tela ou trocar o tamanho, é a grade se reorganizando — as cores e classes continuam as mesmas.




① O seletor lista as pranchas padrão e as suas. As pranchas padrão não são editáveis — mas podem ser copiadas para o Estúdio e personalizadas (cap. 15).



Mais cartões nem sempre é melhor. P dá alvos grandes para quem está começando ou tem mais barreiras motoras; G serve a quem já varre a tela com conforto. Vale experimentar junto com a pessoa — e lembrar que a escolha pode mudar conforme o cansaço, o aparelho e o contexto.

12 Ajustes: voz, aparência e mais

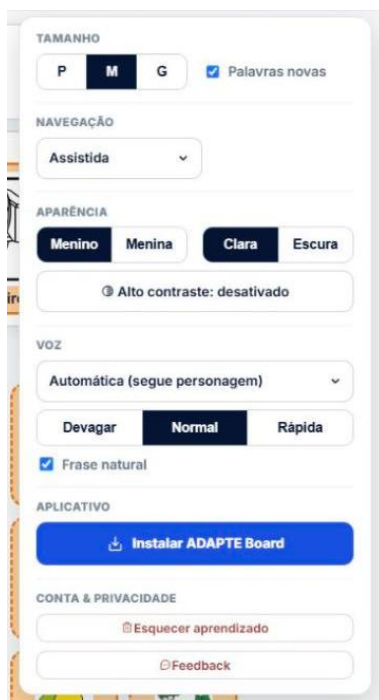

O painel Ajustes no computador. No celular, as mesmas opções ficam no menu ☰.

Opção	O que faz · quando ajustar
Tamanho P·M·G	24 · 36 · 48 cartões. Efeito imediato, neste aparelho.
Palavras novas	Liga/desliga sugestões de palavras fora da prancha (cap. 7).
Navegação	Desligada · Assistida · Automática — comportamento das ROTAS.
Aparência	Menino/Menina muda a personagem dos pictogramas; Clara/Escura muda o tema; Alto contraste reforça bordas e cores.
Voz	Automática (segue a personagem) ou uma voz específica do aparelho (ex.: Google português do Brasil, Daniel, Maria). Velocidade: Devagar · Normal · Rápida.
Frase natural	Liga/desliga a flexão transparente (cap. 8).
Instalar ADAPTE Board	Instala como aplicativo (cap. 18).
Esquecer aprendizado	Apaga o aprendizado pessoal de previsão deste aparelho (e da conta, se houver login).
Feedback	Pergunta anônima para o adulto responsável: "Esta prancha ajudou na comunicação hoje?"



Onde ficam os tons de pele? A personagem (menino/menina) fica nos Ajustes; a cor de pele dos pictogramas é escolhida **por prancha**, ao criar ou editar no Estúdio (Pele: Clara/Escura — cap. 15). As vozes disponíveis variam conforme o aparelho e o navegador.

Ajustes valem para o aparelho em uso. Preferências como voz, velocidade, aparência e o PIN do Modo foco ficam guardadas no próprio aparelho; pranchas próprias e aprendizado de previsão sincronizam pela conta, quando você está logado.

13 Modo foco

PARA QUE SERVE

Travar a tela na prancha e esconder ajustes e menus — assim a pessoa usa a prancha sem sair dela sem querer. Pensado para ser ativado pelo adulto que apoia.

ONDE FICA

Botão **Modo foco**, no canto superior direito (no celular: ícone de cadeado no cabeçalho).

COMO FAZER

1. Toque em **Modo foco**. No primeiro uso, o app pede para criar um **PIN de 4 dígitos** do cuidador — anote em lugar seguro.
2. Com o foco ativo, o cabeçalho mostra apenas **Sair do foco**; seletor de pranchas, Digitar, Imprimir, Compartilhar e Ajustes ficam ocultos.
3. Para sair, toque em **Sair do foco** e digite o PIN.

O QUE DEVE ACONTECER

A comunicação continua completa — cartões, frase, Falar, dock — só a "administração" fica trancada.

SE NÃO FUNCIONAR

Esqueceu o PIN? O próprio app avisa: neste caso, só limpando os dados do site neste aparelho (nas configurações do navegador). Por isso, anote o PIN ao criá-lo.



Com o foco ativo, resta só **Sair do foco** no cabeçalho.



A saída pede o PIN do cuidador.



Cuidado com a autonomia. O Modo foco evita toques acidentais — não é uma ferramenta para impedir escolhas. A pessoa deve continuar podendo trocar de área pelo dock, dizer "não" e navegar pelo vocabulário. Use o foco para proteger a sessão de comunicação, não para limitá-la.

14 Compartilhar e imprimir

PARA QUE SERVE

Levar a prancha a outros aparelhos e pessoas — o celular da avó, o computador da escola — ou ao papel.

ONDE FICA

Botões **Compartilhar** e **Imprimir A4**, no topo (no celular: menu ☰).

COMO FAZER

1. Toque em **Compartilhar**. A janela "Compartilhe com sua Rede de Apoio" mostra o link da prancha.
2. Escolha **Enviar pelo WhatsApp** ou **Copiar link**.
3. Quem recebe abre o link e usa na hora — como o próprio app diz: "Qualquer pessoa pode abrir e usar — não precisa de conta."
4. Para o papel: toque em **Imprimir A4** e confirme na janela de impressão do navegador (dá para "Salvar como PDF" também).

O QUE DEVE ACONTECER

O link abre a prancha em modo de uso. Quem recebe uma prancha sua vê uma cópia para usar — as edições continuam sendo suas, feitas no seu Estúdio.

SE NÃO FUNCIONAR

Link não abre no outro aparelho? Confira se foi copiado inteiro e se há internet no primeiro acesso. Impressão saindo cortada? Na janela de impressão, confira papel A4, orientação e escala "padrão/100%".



Compartilhar a prancha Essenciais: o link (board.adapte.com.br/c/essenciais) abre para qualquer pessoa, sem conta.



Privacidade ao compartilhar. Pense no nome da prancha e nos cartões antes de enviar o link: prefira nomes neutros e evite fotos ou informações pessoais em pranchas que circulam além da rede de apoio próxima.

15 Estúdio: criar a sua prancha

PARA QUE SERVE

Montar pranchas personalizadas — do almoço, do videogame, da escola — com as palavras, imagens e até a voz da sua realidade. Área para adultos da rede de apoio (pede login).

ONDE FICA

Menu da conta (canto superior direito) → **Minhas pranchas**.

COMO FAZER

1. Toque em **+ Nova prancha**.
2. No passo **1 · Prancha**: dê um nome, escolha a **Pele** (Clara/Escura) e a **Personagem** (Menino/Menina) dos pictogramas. Se quiser, marque **incluir as 12 palavras essenciais – Mini core** e/ou **esta é a prancha Início**.
3. No passo **2 · Adicionar cartões**: digite uma palavra em **Buscar figura em todos os bancos** e aguarde — os resultados vêm de vários bancos (ARASAAC e outros). Toque na figura, confira a **Palavra no cartão** e toque em **+ Adicionar cartão**. Também dá para **Tirar foto**, **Enviar imagem**, **Usar link** — ou criar um cartão só de texto.
4. No passo **3 · Na prancha**: veja os cartões, o tipo/cor de cada um (palpite automático da Chave de Fitzgerald) e a **Prévia**. Use **Organizar por classe** (padrão) ou **Reorganizar** para mover à mão.
5. Toque em **Salvar**, no alto. Aparece "Prancha salva ✓" — e ela já está no seletor de pranchas do app.


O QUE DEVE ACONTECER

A prancha aparece em *Minhas pranchas*, com os botões **Editar** · **→ cartão no acervo** · **Excluir** · **.obz** · **Abrir na prancha** →.

SE NÃO FUNCIONAR

Se sair sem salvar, o app avisa. A busca de figuras pode demorar alguns segundos (vários bancos) — aguarde antes de refazer. E lembre: as pranchas padrão (Essenciais, Escola, Hospital) não são editáveis; copie o que precisar para a sua.

O passo 1 da criação: nome, pele, personagem, Mini core e prancha Início (única por conta).

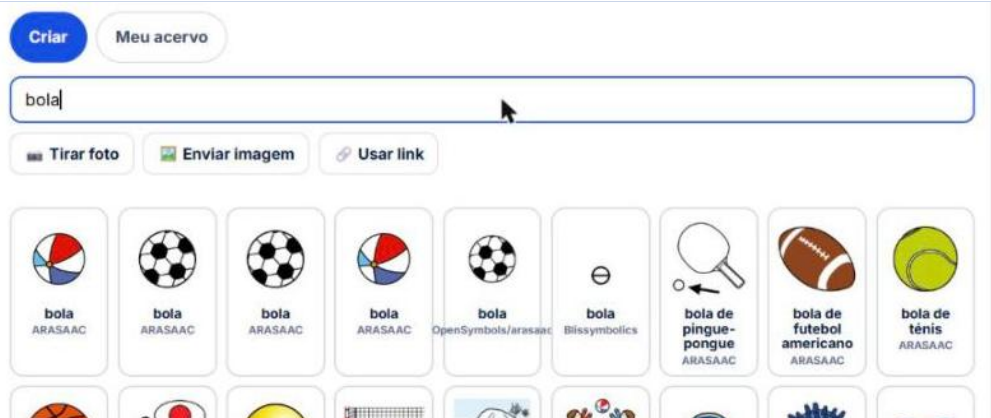

A busca por "bola" retorna figuras de vários bancos — cada resultado indica a fonte.

16 Estúdio (continuação): organizar e editar cartões

O passo 3: cada cartão tem o seletor de classe, ☆ **salvar** (no acervo) e **editar**. "Organizar por classe" agrupa por cor; "Reorganizar" libera o arrastar manual.

Editar cartão: rótulo, fala opcional (se vazio, fala o rótulo), categoria/cor — incluindo → **Navegação (abre outra prancha)** —, imagem (foto, arquivo ou busca, com reposicionamento) e **gravação de fala**. O app explica: a gravação fica só neste aparelho até você tocar em Salvar; depois, toca nos outros aparelhos e nos links compartilhados. Sem gravação, vale a voz sintética. "Aplicar ao cartão" guarda na prancha; **Salvar** (no alto) grava na conta.



Aplicar ao cartão ≠ Salvar a prancha. "Aplicar" confirma a edição daquele cartão; a prancha inteira só é gravada na conta quando você toca em **Salvar** no topo. Ao usar fotos e áudios, prefira conteúdo neutro — e não grave a voz de crianças em pranchas que serão compartilhadas por link.

17 Um cartão que abre outra prancha (+ arquivos .obz)

É o recurso da "prancha âncora": a pessoa fica numa prancha principal (ex.: *Leonardo*) e toca num cartão para abrir outra (ex.: *Videogame*). Há dois caminhos — os mesmos para qualquer prancha sua.

Caminho A — pelo Acervo (a prancha inteira vira um cartão)

1. Em **Minhas pranchas**, na linha da prancha de destino (ex.: *Videogame*), toque em → **cartão no acervo**.
2. **Antes disso**, garanta que essa prancha tem uma **imagem** no cartão (abra-a em **Editar** e use **Buscar figura**, foto ou imagem) — sem imagem, o cartão não se completa no acervo.
3. Abra a prancha principal em **Editar**, toque em **Meu acervo** (ao lado de "Criar") e toque no cartão salvo para adicioná-lo.
4. Toque em **Salvar**.

Caminho B — transformando um cartão em navegação

1. Na prancha principal (em **Editar**), adicione um cartão normalmente (ex.: busque a figura "videogame" e + **Adicionar cartão**).
2. No passo **Na prancha**, toque em **editar** nesse cartão.
3. Em **Categoria/cor**, escolha → **Navegação (abre outra prancha)** e selecione a prancha de destino.
4. **Aplicar ao cartão** → **Salvar**.

Na prancha, o cartão de navegação abre a outra prancha com um toque — e o botão **Voltar** do dock traz de volta.



① + Nova prancha e Importar .obz. Em cada linha: ② → cartão no acervo (Caminho A) e ③ .obz (exportar a prancha como arquivo).

Levar e trazer pranchas: arquivos .obz

O botão **.obz** baixa a prancha no formato aberto OpenBoard — um arquivo que outros aplicativos de CAA compatíveis conseguem importar. O **Importar .obz** faz o caminho inverso. A compatibilidade exata depende do outro aplicativo; ao migrar, confira os cartões após importar.

Se algo diferente acontecer: cartão salvo no acervo não aparece? Confira a imagem (passo essencial do Caminho A) e se você tocou em **Salvar** depois de adicionar. Navegação não abre? Reabra o cartão em **editar** e confirme a prancha de destino escolhida.

18 Conta, privacidade e aparelhos

Usar sem conta

A prancha funciona completa sem cadastro: não pedimos nome nem e-mail, e as frases faladas são processadas no próprio aparelho — o conteúdo do que a pessoa diz não é enviado nem guardado nos servidores do ADAPTE Board.

Entrar com uma conta (opcional, para adultos)

O login usa **Continuar com o Google** e serve para salvar e sincronizar as suas pranchas próprias entre aparelhos. Contas são para adultos da rede de apoio: antes de concluir, é preciso confirmar (marcando uma caixa) que você é maior de idade e responsável pelo uso. No menu da conta ficam **Minhas pranchas**, **Meus aparelhos** (para ver e desconectar aparelhos ligados à conta) e **Sair**.

O que o app pergunta — e o que cada escolha significa

Aviso	O que acontece se você aceitar	Se recusar
Cookies / análise	Ativa estatísticas de uso pseudônimas (Google Analytics). Palavras tocadas ou digitadas não vão ao Google Analytics.	Nada muda no uso da prancha.
Contribuição anônima ("Mapa da Palavra")	Registra, de forma anônima, quais palavras do vocabulário público são tocadas — uma a uma, nunca a frase. Sem áudio, sem nome, sem localização.	Nada muda no uso.
Localização (opcional)	Aprende quais palavras ajudam mais em cada lugar. A posição é arredondada para ~110 m ainda no aparelho — "mapear a palavra no espaço, não rastrear a pessoa".	Nada muda no uso.

Seus direitos e controles

- **Esquecer aprendizado** (Ajustes) apaga o aprendizado pessoal de predição.
- A preferência de cookies pode ser mudada a qualquer momento pelo link **Cookies** no rodapé.
- **Excluir a conta**: na página de login há o botão "Excluir minha conta" — remove, de forma definitiva e em cascata, a conta, as pranchas próprias e o modelo pessoal de predição (pede novo login no Google para confirmar que é você).
- A LGPD garante acesso, correção, portabilidade e eliminação; o contato para exercer direitos é contato@adapte.com.br.



Resumo em uma linha: nada do que a pessoa fala é guardado; tudo o que é medido é anônimo, opcional e recusável sem perder nenhuma função. O texto completo está em board.adapte.com.br/privacidade.html (versão de 17/06/2026).

19 Instalar como aplicativo, offline e atualizações

PARA QUE SERVE

Abrir o ADAPTE Board com um toque, em janela própria, como qualquer app — e tê-lo por perto mesmo com internet instável.

ONDE FICA

Ajustes → Instalar ADAPTE Board (no celular: menu ☰, mesma seção).

COMO FAZER

1. No Android e no computador (Chrome/Edge): toque em **Instalar ADAPTE Board** e confirme.
2. No iPhone/iPad, a instalação é pelo Safari: **Compartilhar → Adicionar à Tela de Início → Adicionar** (o próprio app mostra esse passo a passo).
3. O ícone aparece junto dos outros aplicativos.


O QUE DEVE ACONTECER

O Board abre em janela própria, sem a barra do navegador.

SE NÃO FUNCIONAR

Se o botão não aparecer, o app pode já estar instalado — ou o navegador não suporta instalação (use Chrome, Edge ou o Safari no iOS).

Atualizações respeitosas

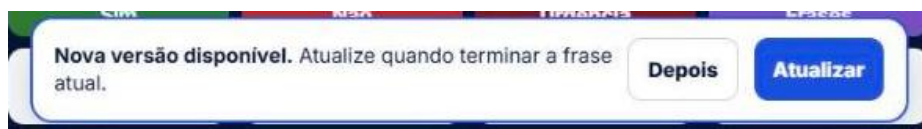

Quando há versão nova, o aviso não interrompe: "Atualize quando terminar a frase atual." **Depois** adia; **Atualizar** recarrega o app.

E sem internet?

O primeiro acesso e as imagens dos pictogramas precisam de internet (elas vêm dos servidores do ARASAAC). Depois de instalado e usado, o app guarda um cache local que ajuda em quedas de conexão — mas figuras ainda não vistas e a busca de novas palavras podem ficar indisponíveis até a internet voltar. (Comportamento offline não testado integralmente nesta verificação — veja a nota de pendências que acompanha o guia.)

20 Solução de problemas

O que está acontecendo	Confira / Tente	Se continuar
Não sai som	Volume e modo silencioso do aparelho; toque em > Falar de novo; troque a voz em Ajustes → Voz.	Teste em outro navegador (Chrome/Edge/Safari) — as vozes vêm do aparelho.
A voz soa estranha ou é outra	Ajustes → Voz: escolha uma voz específica (ex.: Google português do Brasil) e a velocidade Normal.	Instale/ative vozes pt-BR nas configurações do aparelho.
Palavra não encontrada no Digitar	A busca em vários bancos demora alguns segundos — "nada encontrado" pode aparecer antes de terminar. Aguarde; tente palavra mais simples.	Use Aa inserir "palavra" (só texto) — fala do mesmo jeito.
Imagens não aparecem	Internet do aparelho — os pictogramas vêm dos servidores do ARASAAC.	Recarregue a página quando a conexão voltar.
A internet caiu	O que já foi carregado segue funcionando; figuras novas e busca aguardam a conexão.	Instale o app (cap. 18) para melhorar o uso em quedas.
Prancha não salva no Estúdio	Toque em Salvar no alto (aparece "Prancha salva ✓"). Ao sair sem salvar, o app avisa — não ignore o aviso.	Confira o login (menu da conta) e tente de novo.
Cartão salvo no acervo não aparece / não completa	O cartão precisa de imagem : abra a prancha em Editar e use Buscar figura antes de "→ cartão no acervo".	Refaça pelo Caminho B (cartão de navegação, cap. 16).
Cartão de navegação não abre a outra prancha	Edite o cartão e confirme: Categoria = → Navegação e a prancha de destino escolhida; depois Aplicar + Salvar.	Crie o cartão de novo pelo Caminho A (acervo).
Alterações não aparecem em outro aparelho	Salve a prancha no Estúdio; no outro aparelho, recarregue o app.	Confira se os dois estão na mesma conta (menu → Meus aparelhos).
Link compartilhado não abre	Copie o link inteiro; teste você antes de enviar; o primeiro acesso precisa de internet.	Gere o link de novo em Compartilhar.
Impressão sai cortada	Na janela de impressão: papel A4, escala 100%, orientação sugerida.	"Salvar como PDF" e imprimir o PDF.
Áudio não grava / microfone e câmera não abrem	Autorize microfone/câmera quando o navegador pedir (cadeado na barra de endereço → permissões).	Use "Enviar áudio"/"Enviar imagem" com um arquivo pronto.
Tela "mudou" ao girar o celular	É a grade se adaptando — cores e classes não mudam (cap. 3).	Se preferir, fixe a rotação do aparelho.
Esqueci o PIN do Modo foco	Toque em "Esqueci o PIN" para ver a orientação do app.	Limpe os dados do site nas configurações do navegador (isso zera preferências locais).
Botão de instalar não aparece	Pode já estar instalado; iPhone/iPad instala pelo Safari (cap. 18).	Use o site normalmente — o conteúdo é o mesmo.
Arquivo .obz não importa em outro app	Compatibilidade varia entre aplicativos; confira se o outro app aceita OpenBoard (.obz).	Importe de volta no ADAPTE Board para conferir o arquivo.

Nada aqui resolveu? Escreva para contato@adapte.com.br ou use o link **Feedback** no rodapé — sem incluir nome, diagnóstico, telefone ou dados de saúde na mensagem.

21 Créditos, licenças e contato

Conforme a página oficial **Créditos, autoria e licenças** (board.adapte.com.br/creditos), verificada em 30/07/2026:

Projeto, concepção e autoria

Emanuel Santana e Marcia E. F. Pedralino Santana · ADAPTE Educação · adapte.com.br

Pesquisa e vínculo acadêmico

O ADAPTE Board integra a pesquisa de doutorado de Emanuel Santana e está vinculado ao projeto de pesquisa extensionista "**Plataforma Digital da Sociedade Autista**", desenvolvido no Laboratório de Engenharia de Software do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo — Poli-USP.



A menção à Poli-USP identifica o vínculo acadêmico e de pesquisa. Ela não implica endosso institucional, coautoria da Universidade ou responsabilidade da instituição pelos conteúdos e funcionalidades da plataforma, salvo indicação formal em contrário.

Pictogramas

Pictogramas de **Sergio Palao**, disponibilizados por **ARASAAC** — Portal Aragonês de Comunicação Aumentativa e Alternativa (arasaac.org). Licença: Creative Commons Atribuição–NãoComercial–CompartilhaIgual (CC BY-NC-SA). Os pictogramas exibidos nas capturas de tela deste guia são do ARASAAC e seguem essa licença.

Demais componentes

- **Predição linguística** — motor próprio do ADAPTE Board, com corpora abertos e recursos de vizinhança semântica do NILC-USP (referência de licença: CC BY 4.0).
- **Gramática e flexão** — MorphoBr (github.com/LR-POR/MorphoBr), Apache License 2.0.
- **Ícones de interface** — Phosphor Icons (phosphoricons.com), licença MIT. Os pictogramas de comunicação continuam sendo, sempre, ARASAAC.

Direitos e uso

Os conteúdos, pictogramas, bibliotecas, modelos, corpora e demais recursos de terceiros utilizados no ADAPTE Board permanecem sujeitos às respectivas licenças, atribuições e condições de uso. Os demais conteúdos, interface, curadoria, organização pedagógica, fluxos de interação e tecnologias próprias do ADAPTE Board são de titularidade da ADAPTE Educação, salvo indicação expressa em contrário.

Links oficiais

Site: board.adapte.com.br · Créditos: board.adapte.com.br/creditos · Privacidade: board.adapte.com.br/privacidade.html · Contato: contato@adapte.com.br

Sobre este guia. Guia Essencial do ADAPTE Board · versão 1.1 · interface verificada em 30/07/2026, em computador (≈1395×912) e tela estreita (≈627×937). Telas e recursos podem mudar em versões futuras do produto. Este guia não substitui avaliação clínica nem acompanhamento profissional.